

RUS Поддержка лодыжки

Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию и сохраните её для будущего использования.

Продукт Kedley Pro-Light Neoprene заполнен полиэстером и полиамидом для прочности, гибкости и комфорта. Предназначен для сохранения тепла тела с целью обеспечения гибкости и предотвращения травм.

Ознакомьтесь с буклетом инструкции по использованию, имеющимся внутри коробки.

Ассортимент продуктов поддержки Kedley Pro-Lite Neoprene подходит для спорта и повседневного использования.

Применение: бандаж должен правильно подходить по размеру, чтобы обеспечить максимальное удобство и избежать чрезмерного сжатия. Если бандаж используется вскоре после получения травмы, обратитесь за медицинской помощью, если не было отмечено никаких положительных изменений после 72 часов его ношения. Если травма является серьёзной или существуют сомнения в этом - немедленно обратитесь за медицинской помощью. Использовать детьми только под наблюдением взрослых. Держите вне досягаемости маленьких детей.

Внимание: не носите неопреновый бандаж, если Вы используете согревающие жидкие мази, масла или крем. В случае появления сыпи или пропадания чувствительности - немедленно прекратите применение и обратитесь за медицинской помощью.

Инструкция по стирке: стирайте вручную в тёплой мыльной воде и сушите на сухом воздухе.

SPA TOBILLERA

Por favor, lea las siguientes instrucciones y consérvelas para futura referencia.

El Kedley Pro-Light Neoprene se infunde con poliéster y poliamida para aportar fuerza, flexibilidad y comodidad. Diseñado para retener el calor del cuerpo y ayudar a la flexibilidad, previniendo lesiones. Consulte el folleto de instrucciones de uso dentro de la caja. La gama de apoyo Kedley Pro-Lite Neoprene es adecuada tanto para el deporte como para el uso del día a día.

Nota: La órtesis debe ser de la talla correcta para asegurar el máximo beneficio y evitar el exceso de presión. Si la órtesis se utiliza después de una lesión, por favor, busque atención médica si no ha mejorado durante las siguientes 72 horas. Si la lesión es grave o si tiene alguna duda acuda inmediatamente al médico. Si es utilizada por niños, la supervisión de un adulto es necesaria. Mantener fuera del alcance de los niños.

Advertencia: No use soportes de neopreno si se ha aplicado algún linimentos o crema generadora de calor. Si se produce inflamación o sarpullido, deje de usarlo inmediatamente y busque atención médica.

Instrucciones de lavado: Lavar a mano con agua tibia y jabón, séquese con aire.

KEDLEY.co.uk

PRO-LIGHT NEOPRENE

ANKLE SUPPORT

[REF] KED020

ENG ANKLE SUPPORT

Please read the following instructions and keep for future reference.

For support, compression and heat retention around the ankle. Intended uses can include but are not limited to mild ankle sprains and strains, inflammation/swelling, arthritis, soreness, tendonitis, overuse, ankle injuries.

The **PRO-LIGHT** range is made from neoprene rubber and infused with polyester as well as nylon for extra strength, flexibility and comfort, to ensure a secure fit. The neoprene fabric is designed to retain body heat; this warming effect on the muscles and joints increases flexibility and helps prevent injuries. Each product is designed to give maximum support whilst maintaining a comfortable fit.

Note: The support should be sized correctly to ensure maximum benefit and to avoid over compression. If the support is being used following an injury, seek medical advice if no improvement in the condition is seen within 72 hours. If the injury is severe or if in any doubt seek medical advice immediately. If used by children, adult supervision is required. Keep out of reach of young children. Always use on clean intact skin. Do not use if liniments, ointments or creams have been applied to the affected area.

Warning: If soreness or a rash occurs discontinue use immediately and seek medical advice. If any serious incidents occur in relation to using this device it should be reported to the manufacturer and the competent authority of the member state in which the user is established.

Washing & Storage Instructions: Hand wash in lukewarm soapy water, rinse and air dry. Store in a cool, dry place and away from direct heat and sunlight.

PRO-LIGHT NEOPRENE ANKLE SUPPORT

Website: www.kedley.co.uk



Impo International Ltd
Unit 3, 60 Lower Road,
Harrow, Greater London,
HA2 0DH, UK.



Eurolink Europe Compliance Ltd,
Dublin, D02 AY86, Ireland.


REV: KED020IFU-05/21v1




KEDLEY

06052021


- 1) Check size limit on packaging. Slip foot through support ensuring the logo is on the upper strap.

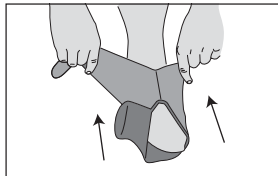


- 2) Secure bottom strap fastener across the bridge of foot.

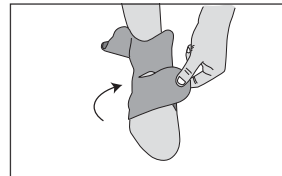

- 3) Secure upper strap fastener around ankle.

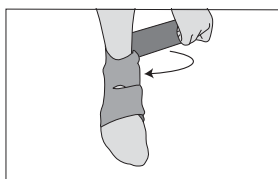

- 4) Check the support fits tightly but does not restrict circulation.

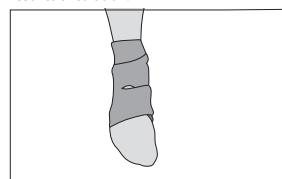

Video fitting instructions available @ www.kedley.co.uk

ITA SUPPORTO PER CAVIGLIA

Leggere attentamente il presente foglietto illustrativo e conservarlo per future consultazioni.

Kedley Pro-Light Neoprene è imbottito di poliestere e poliammide per dare resistenza, flessibilità e comfort. Progettato per mantenere il calore del corpo per aiutare la flessibilità e prevenire gli infortuni. Fare riferimento al volantino con le istruzioni d'uso all'interno della scatola.

La gamma di supporti Kedley Pro-Light Neoprene è adatta sia all'uso sportivo che per tutti i giorni.

Nota: Per evitare livelli compressione troppo elevati o inefficaci si raccomanda di scegliere con cura la taglia del supporto. Indossato a seguito di infortunio, consultare un medico specialistico se non si riscontrano miglioramenti entro 72 ore dallo stesso. In caso di gravi infortuni e/o di dubbi, consultare immediatamente un medico specialistico. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Avvertenza: Non usare il neoprene nel caso in cui siano state applicate pomate o unguenti. In caso di irritazioni cutanee, interrompere l'uso e consultare un medico specialistico.

Istruzioni di Lavaggio: lavare a mano in acqua tiepida e sapone, asciugare all'aria.

FRA CHEVILLIÈRE

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes, et les conserver pour une consultation ultérieure.

Kedley Pro-Light Néoprène est imprégné de polyester et de polyamide pour la force, la souplesse et le confort. Il a été conçu pour maintenir la chaleur corporelle, aider la flexibilité et prévenir des blessures. Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation que vous trouverez dans la boîte.

La gamme de soutien Kedley Pro-Light Néoprène est adaptée autant à une utilisation sportive que quotidienne.

Note: Le soutien doit être de dimension correcte afin de pouvoir assurer un bienfait maximum ainsi que d'éviter tout excès de pression. Si le soutien est utilisé suite à une blessure, veuillez consulter un médecin si vous ne constatez aucune amélioration dans les 72 heures. Si la blessure est importante ou si vous avez le moindre doute, veuillez consulter un médecin immédiatement. Si le soutien est utilisé par un enfant, une supervision par un adulte est nécessaire. Maintenir hors de portée des jeunes enfants.

Avertissement: Ne portez pas de soutien en néoprène si un baume, une crème ou une pommade générant de la chaleur a été appliqué préalablement. Si une douleur ou une démangeaison apparaît, veuillez immédiatement consulter un médecin.

Instructions de lavage: Lavage à main à l'eau savonneuse tiède et sécher à l'air libre.

DEU KNÖCHELUNTERSTÜTZUNG

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen und bewahren Sie sie zur späteren Ansicht auf.

Kedley Pro-Lite neopreen is doordrenkt met polyester en polyamide voor sterkte, flexibiliteit en comfort. Ontworpen om lichaamswarmte vast te houden om de flexibiliteit te bevorderen en blessures te voorkomen. Raadpleeg de bijgevoegde instructiefolder in de verpakking.

De Kedley Pro-Lite neopreen ondersteuningsserie is geschikt voor zowel sportief als dagelijks gebruik.

Hinweis: Die Stütze sollte die richtige Größe besitzen, um die maximalen Vorteile sicherzustellen und übermäßigen Druck zu vermeiden. Wenn die Stütze nach einer Verletzung verwendet wird, suchen Sie einen Arzt auf, wenn innerhalb von 72 Stunden keine Verbesserung des Zustands auftritt. Wenn die Verletzung schwer ist oder Sie Zweifel haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Kinder dürfen die Stütze nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Warnung: Tragen Sie keine Neopren-Stützen, wenn wärmende oder Hitze erzeugende Einreibemittel, Salben oder Cremes aufgetragen wurden. Bei Wunden oder Ausschlag brechen Sie die Benutzung sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf.

Waschanweisung: Per Hand in lauwarmem Seifenwasser waschen und an der Luft trocknen lassen

POR SUPORTE DE TORNOZELO

Por favor, leia as seguintes instruções e guarde para futura referência.

O Kedley Pro-Light em Neopreno está infundido com poliéster e poliamida para força, flexibilidade e conforto. Desenhado para reter o calor corporal, ajudar a flexibilidade e evitar lesões. Consultar as instruções de uso disponíveis no folheto no interior da caixa.

A gama de suportes Kedley Pro-Light em Neopreno é apropriada tanto para as atividades desportivas como para o uso diário.

Observações: o suporte deve ser dimensionado corretamente para garantir o máximo benefício e para evitar o excesso de compressão. Se o suporte for utilizado após uma lesão procure ajuda médica se não houver melhora no quadro dentro de 72 horas. Em caso de lesões graves ou dúvidas consulte um médico imediatamente. Se for utilizado por crianças, é necessária a supervisão de adultos. Manter fora do alcance de crianças pequenas.

Atenção: Não use suporte em neoprene se qualquer tipo de pomada, creme ou óleo que gere aquecimento foi aplicado na área. Se dor ou qualquer tipo de irritação ocorrer interrompa o uso imediatamente e procure um médico.

Instruções de Lavagem: Lavar a mão com água morna e sabão e seque ao vento.

ARA

دعم الكاحل

يرجى قراءة التعليمات التالية واحفظها للرجوع لها في المستقبل.

Kedley Pro-Light Neoprene مشبع بالبوليستر والبولي أميد للقوة والمرونة والراحة. مصمم للحفاظ على حرارة الجسم للمساعدة في المرونة وتفاذي وقوع إصابات. يرجى الرجوع إلى نشرة تعليمات الاستخدام داخل العلبة.

هذه المجموعة من اربطة النيوبرين من فورتونا مناسبة للرياضة والاستخدام اليومي.


ملاحظة: يجب ضبط واختيار المقاس المناسب لضمان الإستفادة القصوى وتجنب الإفراط في الضغط إذا كان استخدام هذه الأربطة فور الإصابة فإنه يجب طلب المشورة الطبية في حال

عدم التحسن في غضون 72 ساعة. وإذا كانت الإصابة شديدة فإنه يجب طلب المشورة الطبية فوراً. إذا استخدمت من قبل الأطفال فإن ذلك يجب أن يتم تحت إشراف الكبار تحفظ بعيداً عن تناول الأطفال الصغار.


تحذير: لا تلبس اربطة النيوبرين في حال استعمال المراهم أو الكريمات التي تولد الحرارة. في حال الوجع أو ظهور طفح جلدي فإنه يجب التوقف عن الإستخدام فوراً وطلب المشورة الطبية.

تعليمات الغسيل: تغسل يدويًا بماء دافئ وتجفف في الهواء.


1) Check size limit on packaging. Slip foot through support ensuring the logo is on the upper strap.

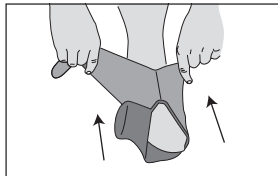


2) Secure bottom strap fastener across the bridge of foot.

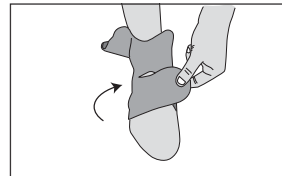

3) Secure upper strap fastener around ankle.

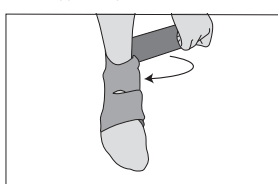

4) Check the support fits tightly but does not restrict circulation.

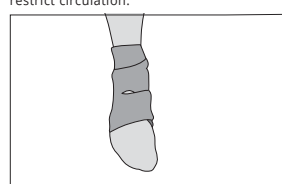

YouTube Video fitting instructions available @ www.kedley.co.uk